FICHA TÉCNICA

Mayfield

INFORMACIÓN GENERAL

Marca	Mayfield
Modelo	R1311
Producto	Mascarilla Quirúrgica de 3 pliegues
Estándar	GB/T32610 -2016
Uso	No médico
Registro y certificación	FDA, CE NTP 329.200:2020

Esta mascarilla plana desechable es de tipo de oreja colgante de tres capas, una capa externa tela no tejida de polipropileno de 25g/m2 , una capa de filtro de tela filtro no tejida meltblown de 25g/m2, una capa interna de tela no tejida de polipropileno de 25g/m2, confortable a la piel), la capacidad de filtración general supera el 95%.



DATOS TÉCNICOS

1 Capa externa	Tela no tejida de polipropileno de 25g/m^2
1 Capa de filtro	1 capa de tela filtro no tejida melt blown de 25g/m^2
1 Capa interna	Tela no tejida de polipropileno de 25g/m^2, confortable a la piel
Clip nasal	Metálico encapsulado moldeable
Sujetador	Elástico
Talla	Estandar
Medida	17.5*9. 5cm
Eficiencia de filtración	>95%


PRESENTACIÓN

Caja de 50 mascarillas
Cajón master de 60 cajas

CARACTERISTICAS

Color celeste con blanco
Hipoalergénico
Vigencia 02 años

INSTRUCCIONES DE USO

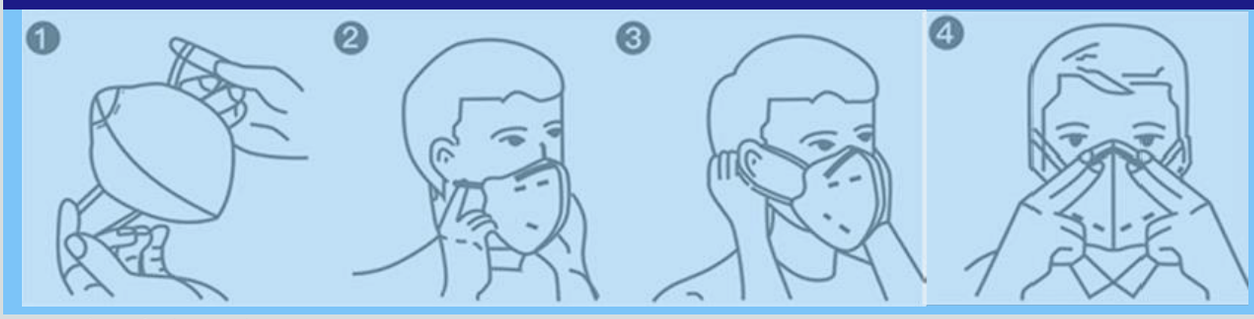

1. Asegúrate que tus manos estén limpias, Abre tu máscara, Mirar hacia afuera.
2. Ponte la máscara en la cara.
3. Cúbrase la nariz y cuelgue el cordón detrás de las orejas.
4. Presione la barra de fijación de acuerdo con la forma de la nariz para fijarla, ajuste la máscara para completar el uso.

SAVISAFETY®



+51 960 287 012



contacto@savisafety.com



savisafety.com